

...επειδή πολλά δείγματα ούρων περιέχουν **vitC** και είναι ψευδώς αρνητικά στις δοκιμασίες σακχάρου αιμοσφαιρίνης...




## COMBI SCREEN PLUS & URILYZER 100

COMBISCREEN PLUS εφοδιασμένο με ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας από το ασκορβικό οξύ.

- Ελαχιστοποίηση των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων με την προστασία των υποστρωμάτων γλυκόζης και αίματος από ασκορβικό οξύ.
  - ...ψευδώς αρνητικά στην παρουσία σακχάρου: μη έγκαιρη διάγνωση των διαβητικών με δοκιμασίες screening, καθυστέρηση έναρξης θεραπείας.
  - ...ψευδώς αρνητικά στην παρουσία αιμοσφαιρίνης : μη έγκαιρη διάγνωση λοιμώξεων του ουροποιητικού .
- Υψηλής ευαισθησίας ταινίες Μοναδικής Χρωματικής Διακριτότητας για καθαρά αποτελέσματα.



## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ

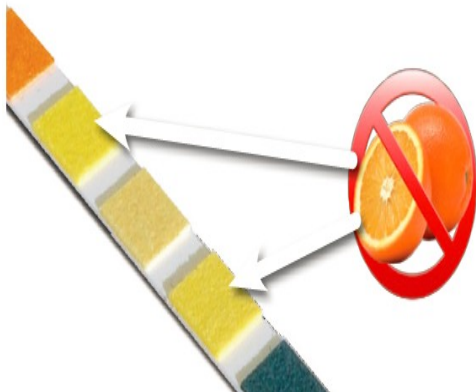


Το Ασκορβικό Οξύ της διατροφής (φρούτα, λαχανικά, χάπια βιταμινών, προσθετικά τροφών) αποβάλλεται στα ούρα. Λόγω του αναγωγικού του δυναμικού, το ασκορβικό οξύ προκαλεί ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα στις δοκιμασίες ταινιών σακχάρου και αιμοσφαιρίνης.

Επιπλέον, στις έγκυες γυναίκες προτείνεται η χορήγηση vit C προκειμένου να αυξηθεί η απορρόφηση σιδήρου από έντερο.

## ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ & ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Διακριτή και Υψηλής Ευκρίνειας αλλαγή χρώματος στην περιοχή κλινικής σημασίας.

- Τα υποστρώματα της ταινίας αλλάζουν από κίτρινο σε πράσινο όταν το δείγμα είναι θετικό.
- Άλλες ταινίες αλλάζουν σκιές του ίδιου χρώματος.

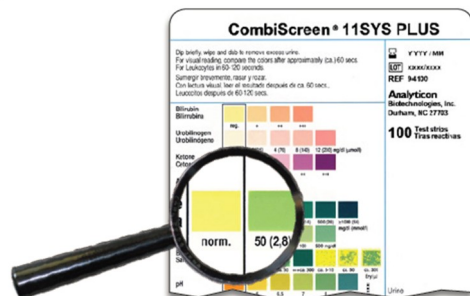

### 11 SYS PLUS

|    |     |     |    |     |      |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| SG | Leu | Nit | pH | Bld | Prot | Glu | Asc | Ket | Uro | Bil |
|----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|

### 10 SL PLUS

|     |    |    |     |     |      |     |     |     |     |
|-----|----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| Leu | SG | pH | Nit | Bld | Prot | Glu | Ket | Uro | Bil |
|-----|----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|

## URILYZER 100

Αυτόματη

έναρξη μετρήσεων, εύκολη, καθαρή και ασφαλής.

- Έγχρωμη Οθόνη Αφής.
- 120 strips/h, (fast mode), 50 strips/h (normal mode.)
- Αυτόματη εκτύπωση αποτελεσμάτων, η, σύνδεση με LIS
- Τεχνολογία μέτρησης LED.
- Σάρωση γραμμικού κώδικα
- Ικανότητα αποθήκευσης 1000 αποτελεσμάτων στην μνήμη



Rx Medical Support Ltd  
Xenofontos 25 Kalamata Greece Tel: + 30 27210 98188  
Fax: + 30 27210 98205 Email: [operations@rxmedical.gr](mailto:operations@rxmedical.gr)